

Avaco

Dwukanałowe urządzenie do terapii podciśnieniowej



Zastosowanie

Avaco jako urządzenie do terapii podciśnieniowej stanowi znakomite uzupełnienie aparatu do elektroterapii. Pracując samodzielnie pełni funkcję aparatu do terapii podciśnieniowej, w połączeniu zaś z elektrostymulatorem służy do aplikacji prądów poprzez ssawki z wbudowanymi elektrodami.

Dzięki podciśnieniu mocowaniu elektrod wykonywanie zabiegów elektroterapii jest znacząco ułatwione szczególnie w miejscach, gdzie trudno użyć elektrod płaskich.

Ponadto w trybie pulsacyjnym występuje efekt mechanicznego masażu, co daje dodatkową korzyść – zwiększenie ukrwienia i metabolizmu.

Unikalną cechą urządzenia jest tryb pracy synchronizowanej z generowanym prądem. Podciśnienie jest zwiększane w fazie stymulacji, a obniżane w czasie odpoczynku. Tryb ten dedykowany jest do współpracy z programami treningowymi generowanymi przez elektrostymulator.

Samouszczelniające się ssawki podnoszą znacznie komfort użytkownika, szczególnie w przypadku pracy jednoobwodowej.

Opcja wyboru różnych rozmiarów ssawek wpływa efektywnie na optymalizację terapii – zależnie od rodzaju prądu i miejsca aplikacji.

Najważniejsze właściwości

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE

- samouszczelniające się ssawki
- dwa rozmiary ssawek: Ø 60 mm i Ø 90 mm
- dwa obwody wyjściowe
- możliwość regulacji podciśnienia
- niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii
- wydajna, cicha pompa
- ergonomia

TRYBY PRACY

- ciągły
- pulsacyjny
- pulsacyjny zmienny
- synchronizowany z prądem
- pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym

- kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu
- dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika
- sygnalizacja napełniania zbiornika

PARAMETRY TECHNICZNE

- częstość pulsacji fali podciśnieniowej: 6, 12, 20, 40, 60 imp/min
- podciśnienie maks.: 500 mbar
- zakres regulacji podciśnienia: 100 – 500 mbar, krok 40 mbar
- liczba ssawek: 4
- zasilanie: 230 V / 20 W
- wymiary" 30x26x12 cm
- masa maks.: 3,5 kg

GWARANCJA

- Avaco 5 lat

KONSTRUKCJA

- nowoczesna konstrukcja
- trwała i niezawodna klawiatura
- autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
- łatwe opróżnianie cieczy ze zbiornika

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przewód sieciowy
- kable do podłączenia elektrostymulatora (2 szt.)
- przewody podciśnieniowe (4 szt.)
- ssawki Ø 60 mm (4 szt.)
- wkładki wiskozowe Ø 60 mm (8 szt.)
- zapasowe bezpieczniki sieciowe (2szt.)
- instrukcja użytkowania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ssawki Ø 90 mm
- wkładki wiskozowe Ø 90 mm
- stolik Versa, Versa X



Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Ssawka Ø 60 mm do Avaco



Ssawka Ø 90 mm do Avaco




Wkładka wiskozowa Ø 60 mm



Wkładka wiskozowa Ø 90 mm



Przewody podciśnieniowe - biały, niebieski

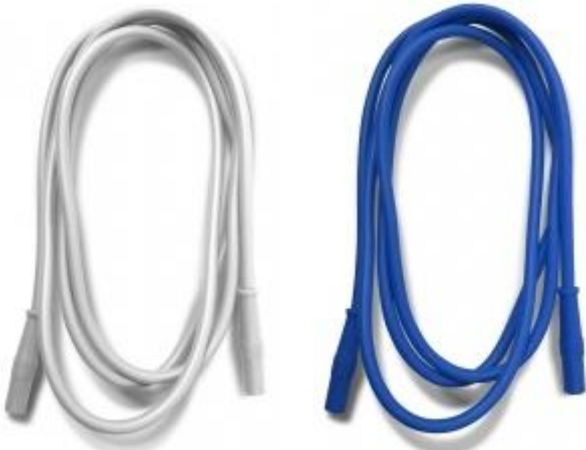

Przewody podciśnieniowe - czarny, czerwony



Kable do podłączenia elektrostymulatora



VERSA - stolik pod aparaturę. Posiada 2 półki



VERSA X - stolik pod aparaturę. Posiada 2 półki z szufladą i uchwyt na ręczniki papierowe.



Dodatkowe wyposażenie do stolika VERSA: trzecia półka, szuflada na akcesoria, uchwyt na żel, uchwyt na ręcznik papierowy

